



XENON²


DER LEICHTESTE
ALUMINIUM
FALTRAHMEN-
ROLLSTUHL



XENON² – DIE STILVOLLE, HIGH-PERFORMANCE SERIE

Egal, ob Sie nach der besten Fahrdynamik oder dem kompaktesten Faltnuss Ausschau halten, der Xenon² vereint beide Elemente auf eindruckliche Art und Weise.

Begeistert Sie das klare, stromlinienförmige Design des Xenon² mit fixem Vorderrahmenteil? Ist es eher die praktische Portabilität des Xenon² mit wegnehmbaren Fussstützen? Oder der verstärkte Rahmen des Xenon² Hybrid? Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, die Eleganz des Xenon² wird auch Sie vollends überzeugen.

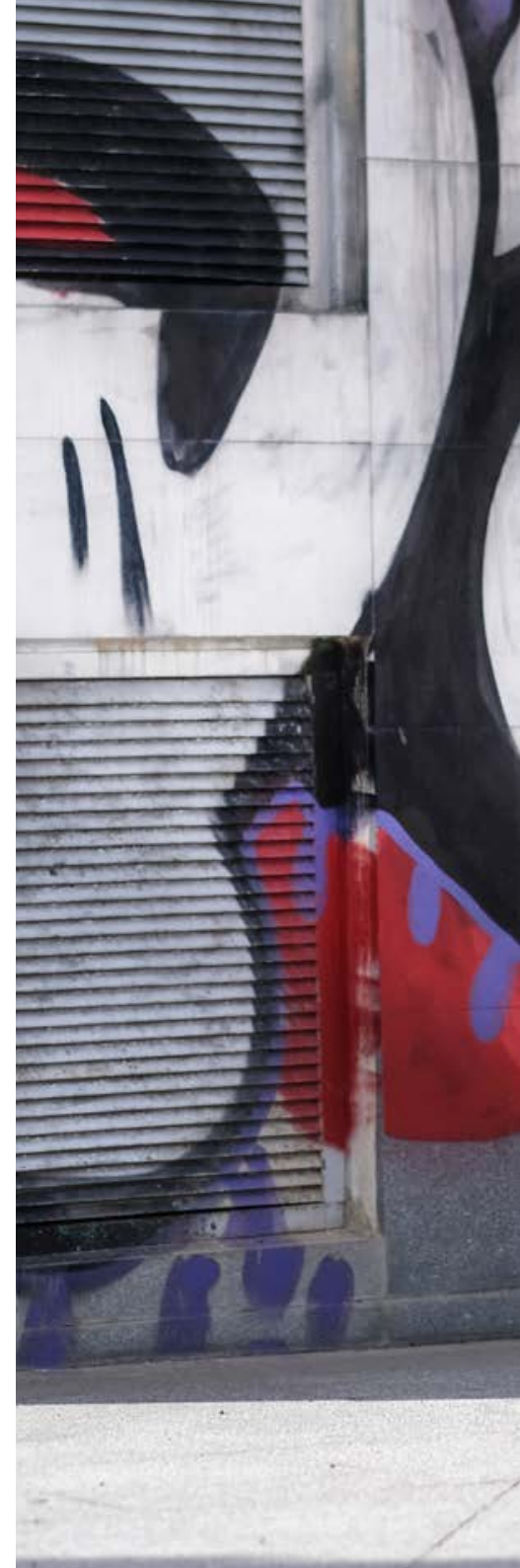



XENON² FF DER LEICHTESTE

Der leichteste Faltrahmen-Rollstuhl weltweit.
Offener fixer Vorderrahmen mit einem coolen
und stromlinienförmigen Design.



XENON² HYBRID DER STÄRKSTE

Keine Kompromisse bei der Rahmen-Steifigkeit.
Verstärkter fixer Vorderrahmen.
Maximales Benutzergewicht: 140 kg.



XENON² SA DER ALLROUNDER

Der verstärkte Rahmen mit abnehm-/weg-
schwenkbaren Fussstützen eignet sich bestens
für stehende Transfers. Dank kompaktem
Faltmass lässt sich der Rollstuhl einfach im
Auto transportieren.





DER LEICHTESTE FALTRAHMEN-ROLL- STUHL DER WELT...

Wie erreicht man ein Faltrahmen-Rollstuhlgewicht unter 8.8 kg? Durch den Einsatz von Premium Rahmenmaterialien wie Flugzeugaluminium und einem innovativen Verfahren, das einzigartig ist bei den SOPUR Produkten – der ShapeLoc Technologie.

Durch eine spezielle Wärmebehandlung sind wir in der Lage, die Festigkeit des Materials zu erhöhen und das Aluminium in einer dünneren Wandstärke herzustellen. Damit ist der Xenon² leichter und stabiler als herkömmliche Faltrahmen-Rollstühle. Testen Sie den Xenon² – Sie werden begeistert sein...





...MIT EINZIGARTIGEM FALTMECHANISMUS

Das Herzstück des Xenon² ist seine einzigartige Kreuzstrebe, welche beinahe unsichtbar unter der Sitzbespannung liegt. Die minimalistisch ausgelegte Kreuzstrebe, kombiniert mit dem offenen Rahmen, erinnert an das Design eines Starrahmen-Rollstuhls.

Aber die Ähnlichkeit endet nicht mit dem Aussehen – die komplett neu gestaltete Radachse (kombiniert mit der Kreuzstrebe) garantiert ein solides und stabiles Fahrverhalten. Das Fahrgefühl erinnert an einen starren Rahmen, aber mit der Handlichkeit eines Faltrahmen-Rollstuhls.

→ Einfacher Faltmechanismus

Die neuen Kreuzstreben-Laschen aus Aluminium führen dazu, dass die Räder auch beim Falten parallel verlaufen. Dadurch bleibt Ihr Xenon² stabil – in jeder Situation.






STILVOLL IN BEWEGUNG

Personalisieren Sie Ihren Xenon² und verleihen Sie Ihrem Rollstuhl seine ganz individuelle Farbnote – mit einer der 32 Farben. Daneben sorgen 5 Farbpakete für das Eloxieren einiger Anbauteile für zusätzliche Ästhetik. Der Farbstreifen des neuen EXO Rückens rundet Ihren farblich ganz auf Sie abgestimmten Xenon² ab.

→ **Personalisieren Sie Ihren Xenon²**
mit einer der 32 Rahmenfarben.

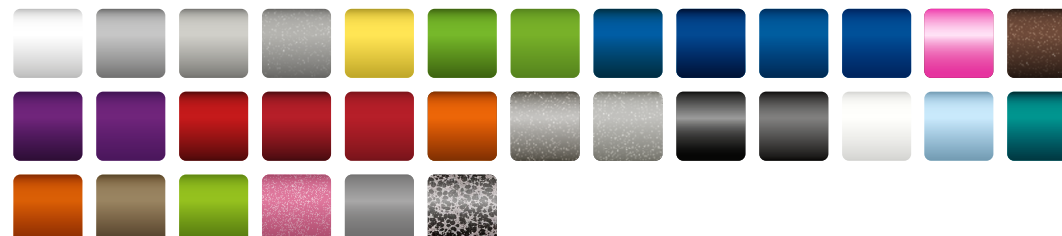

” **Yeray Betancor:** Ich war auf der Suche nach einem Rollstuhl, passend zu meinem aktiven Lebensstil. Ich wollte, dass er leicht, modern, faltbar und einfach ist, ihn mit nur einer Hand ins Auto zu heben. Der SOPUR Xenon² erfüllt alle diese Anforderungen.



→ **Bringen Sie Farbe in Ihre Rückenbespannung**

Für unsere äusserst komfortable EXO Rückenbespannung stehen 5 verschiedenfarbige Einfassbänder zur Auswahl.



→ **Ihre ganz persönliche Farbnote – auch bei Lenkradgabel & Felge**

Sowohl Lenkradgabel als auch Felge sind in 5 verschiedenen eloxierten Farben erhältlich: Silber matt, Blau, Rot, Orange oder Schwarz – für einen einzigartigen Look!



” **Yeray Betancor:** Ich war schon immer ein SOPUR-Typ:
Aktiv und dynamisch. Deshalb ist der SOPUR Xenon²
für mich bestens geeignet.

AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSBAR

Entworfen, um den wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Achsaufnahme des Xenon² ermöglicht eine einfache Höhenverstellung.

Möchten Sie die Schwerpunkteinstellungen Ihres Rollstuhls von passiv auf eher aktiv umstellen? Durch einfaches Entriegeln und Neupositionieren der Achsklemmen kein Problem. Und vergessen Sie nicht den Rückenwinkel entsprechend anzupassen, damit eine ergonomische Sitzhaltung gewährleistet bleibt.

1 Schwerpunkt

Ermöglicht Einstellungen von sehr aktiv bis passiv.

2 Rückenwinkel

Eine gute ergonomische Sitzhaltung kann dank der entsprechenden Einstellung des Rückenwinkels sichergestellt werden.

3 Hintere Sitzhöhe

Passen Sie die hintere Sitzhöhe entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen an.





XENON[®] FF
DER LEICHTESTE



XENON[®] HYBRID
DER STÄRKSTE



XENON[®] SA
DER ALLROUNDER



XENON²

Ultraleicht – mit hervorragender Fahrperformance und einzigartigem Faltmechanismus



Stellen Sie sich den Xenon² nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Optionen. Zusätzliche Informationen zu den hier aufgeführten Optionen entnehmen Sie bitte den Bestellformularen Xenon² & Xenon² SA.



// RÜCKEN ABKLAPPBAR

Der abklappbare Rücken ermöglicht ein kompaktes Faltmass – ein grosser Vorteil beim Transport des Rollstuhls.



// SURGE® LT GREIFREIFEN

Maximale Traktion dank bestem Grip!



// RÜCKEN WINKELVERSTELLBAR

Stilvoller Designer-Rücken, optimal in die Rahmenform integriert. Rückenwinkel von -15° bis +13° in 4° Schritten.



// DESK-SEITENTEIL

Die rückklapp- und abnehmbaren Desk-Seitenteile können mit fixen oder höhenverstellbaren Armauflagen bestellt werden.



// BÜGELARMAUFLAGE GEPOLSTERT

Die Bügelarmauflage erlaubt einen guten Support, wenn benötigt. Für einen hindernisfreien Antrieb des Rollstuhls kann sie problemlos abgeschwenkt werden.



// CARBON SEITENTEIL

Leichtgewichtiges Seitenteil mit einzigartigem Look.



// FUSSRASTE AUTOMATISCH MITFALTEND

Die automatisch mitfaltende Fussraste ist sowohl winkel- als auch tiefeneinstellbar und mit Karbon- oder Kunststoff-Fussauflagen bestellbar. Nur für die Versionen mit fixem Vorderrahmenteil erhältlich.



// FIXATION FÜR BEHINDERENTRANSPORT

Mit dieser Fixation ist der Rollstuhl für den Transport im Fahrzeug zugelassen (Crash Test gem. ISO 7176-19).

TECHNISCHE DATEN

	Xenon ² FF	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Max. Benutzergewicht	110 kg	140 kg	125 kg
Sitzbreite	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Sitztiefe	34 – 50 cm	34 - 50 cm	34 - 50 cm
Sitzhöhe vorne	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Sitzhöhe hinten	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Rückenhöhe	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Rückenwinkel	-15° bis +13° in 4° Schritten	-15° bis +13° in 4° Schritten	-15° bis +13° in 4° Schritten
Schwerpunktseinstellungen	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Radsturz	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Rahmenversion	Offener Rahmen mit fixem Vorderrahmen	Offener Rahmen mit fixem Vorderrahmen	Verstärkter Rahmen mit abschwenkbaren FS
Gesamtgewicht	ab 8,8 kg	ab 9,5 kg	ab 10,3 kg
Rahmenfarben	32	32	32
Crash Test	Ja	Ja	Ja

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch