



**B74 - Trommelbremsen**



**B05 - höhen-verstellbare  
Armlehnen**



**B78 - Kippschutz**

# V200

l e i c h t



5 Armpolstertiefen

Abklappbare, abnehmbare  
und höhenverstellbare  
Armlehnen (5 Positionen)

Abklappbare und  
abnehmbare  
Fußstützen

Einstellbare Fußplatten

Steckachsen für  
einfache und schnelle  
Entfernung der Räder












Einstellbare Sitztiefe






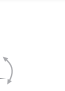



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Angaben V200

 Gesamtbreite*	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
590	390	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
620	420	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
640	440	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
660	460	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
680	480	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
700	500	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten
16,5	7°	10°	60	1500	200	22" - 24"

\*Gesamtbreite mit Trommelbremse + 30 mm

Crash getestet nach ISO-Norm 7176-19 - Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

## Modell V200

Der V200 ist ein Leichtgewicht-Rollstuhl für temporäre oder permanente Verwendung mit optimalen Anpassungsmöglichkeiten:

- 4 Sitzhöhen
- 2 Sitztiefen
- 5 Armlehnenhöhen
- 5 Armpolstertiefen
- 5 Positionen der Sitzkantelung 0° - 10°
- eine umfangreiche Zubehörpalette

## Farben



## Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

## Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.